


FÜR DIE RESEKTION UND VAPORISATION IN NaCl:
BIPOLAR CUT++.

1 BIPOLAR RESECTION

Guide / progs. MF receptacle

Mode	Mode
BIPOLAR CUT++	BIPOLAR SOFT++
Effect 5	Effect 6
Upmax: 390Vp	Upmax: 155Vp

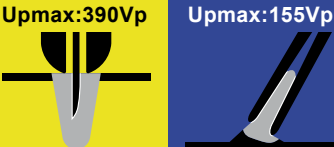


BIPOLAR CUT++: DAS PLUS FÜR ANSCHNITT UND DAS PLUS FÜR HÄMOSTASE.

BIPOLAR CUT++ bietet eine neue Schnittqualität für die Resektion der Prostata, der Blase oder des Uterus.

Und das sind die Vorteile:

- ❖ Schneller Lichtbogen-Aufbau, sofortiger Anschnitt (ohne mechanischen Druck auf das Gewebe)
- ❖ Lichtbogenintensität wird geregelt, dadurch homogener Aufbau des Lichtbogens (bei geringerem Energieeintrag)
 - gleichmäßige Vaporisationseffekte
 - Sicherheit für den Patienten, homogene Hämostase
 - Reduktion von OP-Kosten (durch geringeren Verschleiß an Schlingen)
- ❖ Komfortable Bedienung: Plug and play
- ❖ BIPOLAR CUT++ ist kompatibel mit allen gängigen bipolaren Resektoskopen

Mit AUTO CUT, HIGH CUT und DRY CUT stehen im VIO-System auch bewährte monopolare Resektionsmodes zur Verfügung.

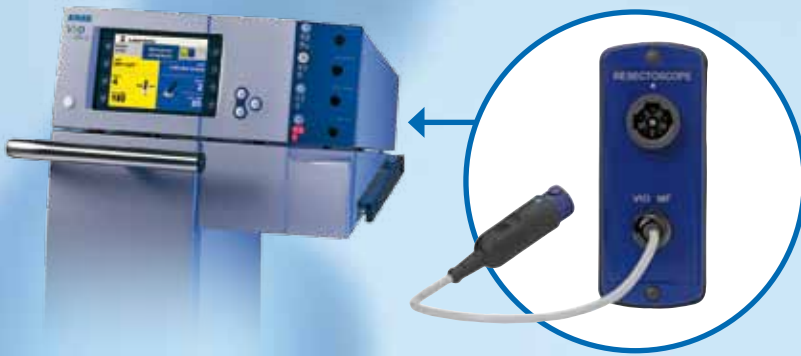

Rüsten Sie Ihr VIO 300 D auf mit dem bipolaren Resektionsadapter inkl. Software



BIPOLAR CUT++ mit automatischer Leistungsdosierung für die bipolare Resektion in NaCl.



Schneller Aufbau des Lichtbogens.



Homogene Effekte bei der Vaporisation von Gewebestrukturen.

ERBE Elektromedizin GmbH
Waldhörnlestraße 17
72072 Tübingen
Telefon 07071 755-0
Telefax 07071 755-179
sales@erbe-med.de
www.erbe-med.de



ERBE

Perfection for Life