






POUR LA RÉSECTION ET LA VAPORISATION
SOUS SÉRUM PHYSIOLOGIQUE : BIPOLAR CUT++.

1 BIPOLAR RESECTION			
Guide / progs.	MF receptacle		  
Mode BIPOLAR CUT++	Mode BIPOLAR SOFT++		
Effect 5	Upmax:390Vp 	Upmax:155Vp 	Effect 6

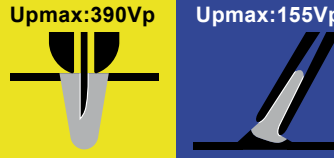


BIPOLAR CUT++ : UN PLUS POUR L'AMORÇAGE DE LA COUPE ET UN PLUS POUR L'HÉMOSTASE.

BIPOLAR CUT++ offre une meilleure qualité de coupe pour la résection de la prostate, de la vessie ou de l'utérus.

Et voici les avantages :

- ❖ Génération rapide de l'arc électrique, amorçage de coupe immédiate (sans pression mécanique sur le tissu)
- ❖ Régulation de l'intensité pour une production homogène de l'arc électrique (avec un apport d'énergie faible)
 - Effets de vaporisation homogènes
 - Sécurité pour les patients, hémostase homogène
 - Réduction des frais d'intervention (grâce à une faible usure des anses)
- ❖ Manipulation confortable : Plug and play
- ❖ BIPOLAR CUT++ est compatible avec tous les résectoscopes bipolaires

Avec AUTO CUT, HIGH CUT et DRY CUT, le système VIO dispose également de modes de résection éprouvés.

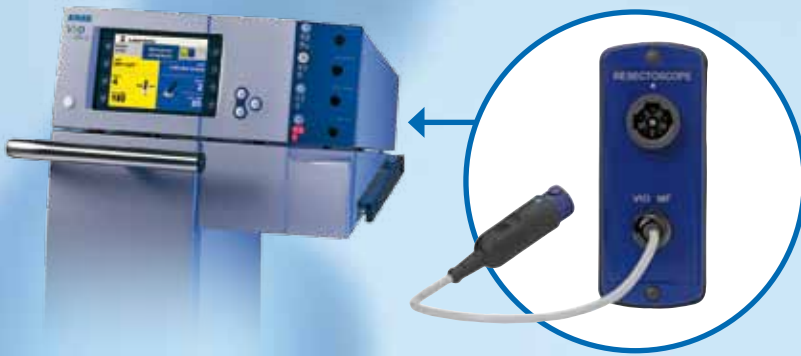

Equipez votre VIO 300 D de l'adaptateur de résection bipolaire et de son logiciel.

ERBE Medical S.à.r.l.
Z.A.C. Sans Souci
470 Allée des Hêtres
F-69760 Limonest
Téléphone 0478649255
Télécopie 0478661643
erbe@erbe-france.com
www.erbe-france.com

ERBE Elektromedizin GmbH
Waldhoernlestrasse 17
72072 Tuebingen
Allemagne
Téléphone +49 7071 755-0
Télécopie +49 7071 755-179
sales@erbe-med.de
www.erbe-med.com



BIPOLAR CUT++ avec dosage automatique de la puissance pour la résection bipolaire sous sérum physiologique.



Production rapide de l'arc électrique.



Effets homogènes lors de la vaporisation de structures tissulaires.



ERBE

Perfection for Life