






PARA LA RESECCIÓN Y VAPORIZACIÓN BIPOLAR
EN SOLUCIÓN SALINA: BIPOLAR CUT++.

| 1 BIPOLAR RESECTION | | | |
|------------------------------|---|---|--|
| Guide / progs. | MF receptacle | |    |
| Mode BIPOLAR CUT++ | Mode BIPOLAR SOFT++ | | |
| Effect 5 | Upmax:390Vp  | Upmax:155Vp  | Effect 6 |



BIPOLAR CUT++:

POTENCIA ADICIONAL PARA EL CORTE INICIAL Y LA HEMOSTASIA.

El modo **BIPOLAR CUT++** ofrece una nueva calidad de corte para la resección de la próstata, de la vejiga o del útero.

Y estas son las ventajas:

- ✦ Creación rápida del arco voltaico, corte inicial inmediato (sin presión mecánica sobre el tejido)
- ✦ Regulación de la intensidad del arco voltaico y por consiguiente creación homogénea del arco voltaico (con un insumo de energía menor)
 - Efectos de vaporización homogéneos
 - Seguridad para el paciente, hemostasia homogénea
 - Reducción de gastos quirúrgicos (gracias a un menor desgaste de las asas)
- ✦ Manejo cómodo: Plug and play
- ✦ BIPOLAR CUT++ es compatible con todos los resectoscopios bipolares

Con AUTO CUT, HIGH CUT y DRY CUT también dispondrá en el sistema VIO de modos de resección monopulares probados.




BIPOLAR CUT++ con dosificación automática de la potencia para la resección bipolar en NaCl.



Creación rápida del arco voltaico.



Efectos homogéneos durante la vaporización de estructuras tisulares.

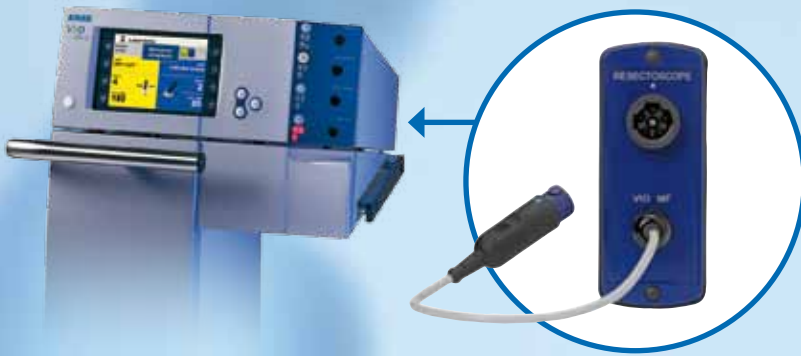

Amplíe su VIO 300 D con el adaptador de resección bipolar, incl. software

ERBE Elektromedizin GmbH
Waldhoernlestrasse 17
72072 Tuebingen
Alemania
Teléfono +49 7071 755-0
Telefax +49 7071 755-179
sales@erbe-med.de
www.erbe-med.com



ERBE

Perfection for Life