

L'UNITÀ COMPATTA VIO
PER IL DAY SURGERY CHIRURGICO



VIO® 50 C E VIO® 100 C – LA GAMMA DELLE APPLICAZIONI

Le unità chirurgiche HF VIO della serie C soddisfano tutte le esigenze della chirurgia specialistica ambulatoriale, a fronte di un rapporto ottimale prezzo-prestazioni, con modalità di taglio unipolare e di coagulazione unipolare e bipolare.


L'operatore può scegliere liberamente tra un'ampia scelta di prese e memorizzare programmi individuali. La funzione AUTO START (VIO 100 C) assicura inoltre un'estrema praticità e sicurezza d'impiego.

Con VIO 50 C e VIO 100 C sono disponibili le seguenti modalità VIO in qualità riproducibile:



AUTO CUT

Regolazione automatica della qualità del taglio secondo necessità mediante regolazione della tensione. Il VIO si adegua alla modalità di lavoro del chirurgo. Per una necrosi minima e un'elevata qualità e riproducibilità dell'effetto taglio, ampiamente indipendente dall'elettrodo, dalla procedura e dal tipo di tessuto.

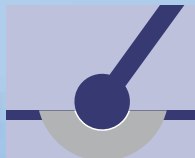

SOFT COAG

Nuova e rapida modalità di coagulazione soft, assistita dal dosaggio della potenza. Senza carbonizzazione e con rischio minimo di adesione dell'elettrodo al tessuto. Per una coagulazione atraumatica ma profonda.



DRY CUT

La combinazione di regolazione della tensione e forma di corrente modulata genera un taglio chirurgico HF con marcate caratteristiche di emostasi, a fronte di una minima formazione di fumo. Destinato a interventi che richiedono una buona emostasi primaria.



FORCED COAG

Procedure rapide ed efficaci, indicate per tutte le esigenze di coagulazione standard. Possibilità di esecuzione diretta, utilizzando l'elettrodo di coagulazione, o indiretta, ad es. con una pinzetta chirurgica isolata.



BIPOLAR SOFT COAG

Coagulazione bipolare. Grazie alla possibilità di scegliere tensioni ridotte, diminuisce notevolmente il rischio di carbonizzazione e di adesione dello strumento ai tessuti.

CONFIGURAZIONE INDIVIDUALE SECONDO LE SINGOLE ESIGENZE



Moduli presa di ERBE:



8/4 mm,
bipolare
N° 20140-610



2 pin-22-28-8/4 mm,
bipolare
N° 20140-613



3 pin Bovie,
unipolare
N° 20140-622



3 pin-9/5 mm,
unipolare
N° 20140-623



Elettrodo neutro
6 mm
N° 20140-640



Elettrodo neutro
2 pin
N° 20140-641



Elettrodo neutro
6 mm-2 pin
N° 20140-642



Esempi di applicazione:

Epilazione, varici, coagulazione wet-field, blefaroplastica, asportazione di lipoma, entropion, cheratoma

Settori d'applicazione delle unità VIO C:

- ✦ Chirurgia d'urgenza
- ✦ Dermatologia
- ✦ Oftalmologia
- ✦ Chirurgia plastica
- ✦ ORL
- ✦ Ginecologia



Dati tecnici	
Potenza d'uscita	
Potenza CUT max. VIO 100 C	100 Watt a 500 Ohm
Potenza COAG max. VIO 100 C	80 Watt a 100 Ohm
Potenza CUT max. VIO 50 C	50 Watt a 500 Ohm
Potenza COAG max. VIO 50 C	50 Watt a 100 Ohm
Sistema di sicurezza NE	presente
Collegamento alla rete elettrica	
Tensione nominale di rete	100 V - 240 V
Frequenza nominale di rete	50 / 60 Hz
Dimensioni e peso	
Larghezza x altezza x profondità	280 x 135 x 300 mm
Peso	4 kg
Norme	
Classificazione ai sensi della direttiva CE 93/42/CEE	II b
Classe di protezione ai sensi di EN 60 601-1	I
Tipo ai sensi di EN 60 601-1	CF
Codici articoli	
VIO 100 C	N° 10140-500
VIO 50 C	N° 10140-550
Interruttore a doppio pedale	N° 20189-107
Interruttore a pedale singolo (senza Fig.)	N° 20188-102
Calotta di protezione VIO C (senza Fig.)	N° 20140-500

CHIRURGIA AD ALTA FREQUENZA
SINTESI VASCOLARE
COAGULAZIONE CON ARGON PLASMA
CRIOCHIRURGIA
IDRODISSEZIONE

ERBE Italia S.r.l.
Viale Sarca, 336/f
20126 Milano
Italia
Telefono +39 02 6474681
Telefax +39 02 64746830
info@erbe-italia.com
www.erbe-italia.com

ERBE Elektromedizin GmbH
Waldhoernlestrasse 17
72072 Tuebingen
Germania
Telefono +49 7071 755-0
Telefax +49 7071 755-179
info@erbe-med.com
www.erbe-med.com



ERBE

Perfection for Life